

SICH WOHLFÜHLEN - DAZUGEHÖREN *pro akustik*[®]

Pro Akustik Pflegefibel



Inhalt

- 1 Gute Pflege – die volle Klangqualität erhalten**
- 2 Acht Tipps, um Schäden an Ihrem Hörsystem vorzubeugen**
- 3 So trocknen Sie Ihr Hörsystem**
 - 3.1 ... wenn Sie ein IO-Gerät besitzen**
 - 3.2 ... wenn Sie ein HdO-Gerät besitzen**
- 4 So reinigen Sie Ihr Hörsystem**
 - 4.1 Die Reinigung von IO-Geräten**
 - 4.2 Die Reinigung von HdO-Geräten**
- 5 Pro Akustik Hörsystempflegeprodukte in der Übersicht**

1 Gute Pflege – die volle Klangqualität erhalten

Damit Ihr Hörsystem Sie auch in Zukunft zuverlässig und klanglich präzise in Ihrem Alltag begleitet, braucht es die richtige Pflege, eine sorgfältige Handhabung und eine regelmäßige Wartung.

Als kostenlose Serviceleistung überprüft Ihr Pro-Akustiker in regelmäßigen Abständen Ihr Gerät ausführlich auf seine Leistungsfähigkeit. Eventuelle Schäden können so schnell behoben werden.

Zudem können Sie durch eine sorgfältige Pflege zu Hause wesentlich zur Langlebigkeit Ihres Hörsystems beitragen. Wie Sie die verschiedenen Gerätetypen problemlos trocknen und einfach und schonend reinigen, wird Ihnen auf den folgenden Seiten Schritt für Schritt erklärt. Außerdem finden Sie einige Tipps wie Sie bei der täglichen Benutzung Schäden vorbeugen können.

Falls Sie Fragen zu Pflege oder Handhabung Ihres Hörsystems haben, ist Ihr Pro-Akustiker jederzeit als kompetenter Ansprechpartner für Sie da. Suchen Sie ihn einfach in seinem Fachgeschäft auf oder nutzen Sie den speziell für Sie eingerichteten telefonischen Beratungsservice.

2 Acht Tipps, um Schäden an Ihrem Hörsystem vorzubeugen

1. **Wenn Sie Ihr Hörsystem über einen längeren Zeitraum nicht tragen**, entfernen Sie bitte die Batterien und legen Sie es in ein Trocken-Set. So vermeiden Sie, dass sich die Batterien selbst entladen und dass die beim Tragen im Gerät entstandene Feuchtigkeit zu Korrosionsschäden führt.
2. **Wenn Sie Ihr Hörsystem kurzzeitig ablegen**, ist das dazugehörige Etui der sicherste Aufbewahrungsort. Denn ein unausgeschaltet liegengebliebenes Gerät erzeugt z.B. für die feinen Ohren Ihres Hundes einen unangenehmen Ton, der ihn dazu animieren könnte, Ihr Hörsystem zu zerbeißen. Auch Kinder sollten sich lieber mit Ihnen gemeinsam Ihr Gerät ansehen, damit sie nicht versehentlich etwas beschädigen.
3. Wie jedes hochwertige technische Produkt verträgt Ihr Hörsystem keine Feuchtigkeit. Legen Sie es deshalb vor dem **Duschen, Haare waschen** oder dem **Saunagang** ab und schützen Sie es vor dem feuchten Raumklima, indem Sie es im Etui oder im Trocken-Set verwahren.
4. Sorgen Sie beim **Auf- und Absetzen** Ihres Hörsystems für eine weiche Unterlage. So vermeiden Sie, falls Ihnen das Gerät einmal herunterfallen sollte, dass durch den harten Aufprall die zarte Membran im Mikrofon oder im Hörer beschädigt wird.
5. Damit das Mikrofon nicht verstopft oder der Lautstärkeregelverklebt, warten Sie am besten, bis Ihr Haarspray getrocknet ist, bevor Sie Ihr Hörsystem einsetzen.

6. Legen Sie Ihr Hörsystem zum **Trocknen** bitte nicht auf die Heizung. Hitze kann dazu führen, dass sich das Gehäuse verformt; bei Temperaturen über 50°C wird das Gerät funktionsuntüchtig. Optimal geeignet ist ein spezielles Trockenkissen oder eine Trocken-Box, die dafür sorgen, dass sich Ihr Hörsystem beim Trockenvorgang nicht überhitzt.
7. Verzichten Sie bitte darauf, **hartnäckige Verschmutzungen** abzukratzen oder mit spitzen Gegenständen in Ihr Hörsystem einzudringen, da es dabei leicht beschädigt werden kann. Stärker verschmutzte Hörsysteme können Sie bei Ihrem Pro-Akustiker reinigen lassen.
8. Damit Ihr Hörsystem Ihnen bestmögliche Dienste leistet, ist neben der Gerätepflege auch die **Ohrhygiene** und **Ohrgesundheit** wichtig. Suchen Sie deshalb in regelmäßigen Abständen (etwa alle sechs Monate) Ihren HNO-Arzt auf, damit er Ihre Ohren untersuchen und gegebenenfalls Ohrenschmalz entfernen kann.

Wenn Sie bemerken, dass Ihr Hörsystem nicht einwandfrei funktioniert, können Sie sich jederzeit an Ihren Pro-Akustiker wenden. Er kümmert sich darum, dass Sie so schnell wie möglich wieder den vollen Leistungsumfang Ihres Gerätes nutzen können. Und sollte eine Reparatur einmal mehr Zeit in Anspruch nehmen, stellt er Ihnen als kostenlose Serviceleistung gerne ein Leihgerät zu Verfügung.

3 So trocknen Sie Ihr Hörsystem

Beim Tragen dringen Schweiß und Kondensflüssigkeit in Ihr Hörgerät ein. Solche Feuchtigkeit schadet der empfindlichen Technik Ihres Hörsystems. **Damit es dauerhaft gut funktioniert, sollte es deshalb täglich getrocknet werden.**

Da Sie Ihr Hörsystem ohnehin nachts ablegen, ist es am einfachsten den Trockenvorgang jeweils über Nacht durchzuführen. Sie können dazu je nach Vorliebe ein elektrisches Trockenkissen oder einen Trockenbecher mit Trockenkapseln verwenden.

Und so geht es:

3.1 ... wenn Sie ein IO-Gerät besitzen

A. Trocknen mit dem Trockenkissen oder der Trocken-Box

Öffnen Sie das Batteriefach Ihrer IO-Geräte und entnehmen Sie die Batterie. Legen Sie Ihr Hörsystem mit geöffnetem Batteriefach in die Tasche Ihres Trockenkissens oder in Ihre Trocken-Box und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.


B. Trocknen mit Trockenbecher und -kapseln

Öffnen Sie das Batteriefach Ihrer IO-Geräte und entnehmen Sie die Batterie.

Nehmen Sie eine Trockenkapsel aus der Verpackung.

Legen Sie die Trockenkapsel, die Seite mit der Pappe nach oben, zusammen mit Ihren IO-Geräten in den Trockenbecher und schrauben Sie den Becher fest zu. Das Batteriefach sollte während des Trockenprozesses geöffnet sein.

Hinweis: Wenn Sie den Trockenbecher mit der Kapsel nach dem Gebrauch gut verschließen, können Sie eine Kapsel mehrmals verwenden. Hat sich die Kapsel vollständig entfärbt, müssen Sie sie gegen eine neue austauschen.

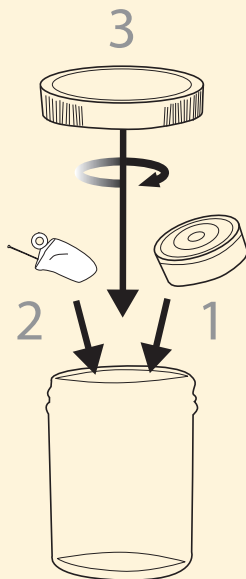

3.2 ... wenn Sie ein HdO-Gerät besitzen

A. Trocknen mit dem Trockenkissen oder der Trocken-Box

Öffnen Sie das Batteriefach Ihrer Hörgeräte und entnehmen Sie die Batterie.

Legen Sie Ihre Hörgeräte mit geöffnetem Batteriefach in die Tasche Ihres Trockenkissens oder in Ihre Trocken-Box und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.


B. Trocknen mit Trockenbecher und -kapseln

Öffnen Sie das Batteriefach Ihrer Hörgeräte und entnehmen Sie die Batterie.

Nehmen Sie eine Trockenkapsel aus der Verpackung.

Legen Sie die Trockenkapsel, die Seite mit der Pappe nach oben, zusammen mit Ihren Hörgeräten in den Trockenbecher und schrauben Sie den Becher fest zu. Das Batteriefach sollte während des Trockenprozesses geöffnet sein.

Hinweis: Wenn Sie den Trockenbecher mit der Kapsel nach dem Gebrauch gut verschließen, können Sie eine Kapsel mehrmals verwenden. Hat sich die Kapsel vollständig entfärbt, müssen Sie sie gegen eine neue austauschen.

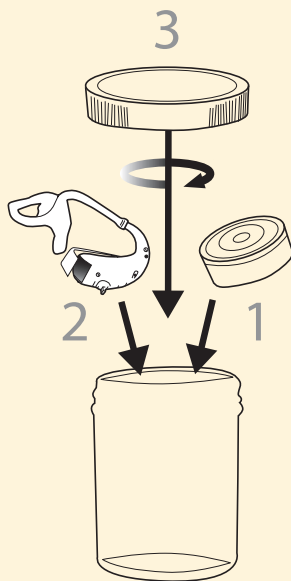

4 So reinigen Sie Ihr Hörsystem



Damit Ihr Hörsystem auch weiterhin tadellos funktioniert und für Ihre Ohren gut verträglich bleibt, sollte es nicht nur trocken sondern auch sauber und frei von Bakterien sein.

Deshalb sollten Sie **sich mindestens einmal in der Woche der gründlichen Reinigung Ihres Hörsystems widmen**. Was dazu nötig ist, erfahren Sie hier.

4.1 Die Reinigung von IO-Geräten

A. Reinigungstücher

Entnehmen Sie dem Einzeltütchen ein Reinigungstuch. Reiben Sie Ihr Hörsystem vorsichtig mit dem feuchten Tuch ab. Die Reinigungsflüssigkeit löst Verschmutzungen und wirkt gleichzeitig antibakteriell. So beugen Sie Ohrentzündungen vor. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät nicht zu nass wird. So vermeiden Sie, dass Flüssigkeit in das Innere Ihres Hörsystems eindringt und die empfindliche Technik beschädigt.

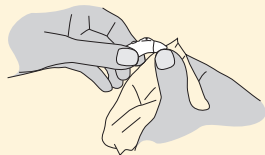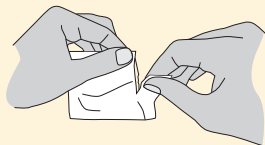


B. Reinigungsspray mit Zerstäuber

Sprühen Sie etwas Reinigungsflüssigkeit auf ein weiches, fusselfreies Tuch und verfahren Sie wie mit Reinigungstüchern.

C. Reinigungsstick

Drücken Sie den Reinigungskopf des Sticks drei mal nach unten, so dass der Schwamm leicht mit Reinigungsflüssigkeit benetzt wird. Reinigen Sie Ihr IO-System, indem Sie den Schwamm mit kreisenden Bewegungen über das Gerät führen.

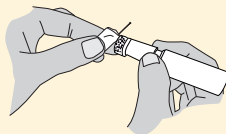

4.2 Die Reinigung von HdO-Geräten

Während Sie Ihr HdO-System ruhig insgesamt trocknen können, sollten Sie für eine gründliche Reinigung unbedingt das eigentliche Hörgerät von Schallschlauch und Ohrpassstück trennen, so dass keine Nässe an die empfindliche Technik im Hörgerät gelangt. Damit Sie nicht versehentlich Ihr Hörgerät für das rechte Ohr mit dem für das linke Ohr verwechseln, bringt Ihnen Ihr Pro-Akustiker gerne eine entsprechende Markierung an.

A. Die Reinigung des eigentlichen Hörgeräts


Trennen Sie bei Ihrem HdO-System durch Ziehen das eigentliche Hörgerät von Schallschlauch mit Ohrpassstück. Das Hörgerät können Sie genauso wie ein IO-System entweder mit feuchten Hörsystemreinigungstüchern, mit Reinigungsflüssigkeit aus der Flasche, wahlweise mit Zerstäuber oder Pinselkopf oder mit dem Reinigungsstick reinigen. Die genaue Anwendung wird unter 4.1. dieser Pflegefibel beschrieben.

Legen Sie das fertig gereinigte Hörgerät in sein Etui und beginnen Sie nun mit der Reinigung von Ohrpassstück und Schallschlauch.

B. Die Reinigung von Ohrpasstück und Schallschlauch

Für die Reinigung von Ohrpasstück mit Schallschlauch können Sie am besten eine Reinigungsdose mit Reinigungstabletten und einen Blasebalg (Airball) verwenden.

Schrauben Sie die Reinigungsdose auf und entnehmen Sie das Sieb. Füllen Sie die Reinigungsdose zu $\frac{3}{4}$ mit warmem Wasser und geben Sie eine Reinigungstablette hinein. Legen Sie nun Otoplastik und Schallschlauch auf das Sieb und tauchen Sie es in die Reinigungsflüssigkeit. Otoplastik und Schallschlauch sollten nun circa 30 Minuten im Reinigungsbad bleiben. Nehmen Sie dann das Sieb aus der Dose, spülen Sie das Ohrpasstück mit Wasser und trocknen Sie es ab. Entfernen Sie mit dem Airball Flüssigkeitsreste aus dem Schallschlauch und den Bohrungen des Ohrpasstückes.

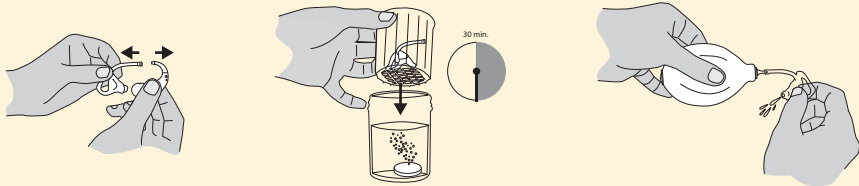

Hinweis: Pusten Sie bitte den Schallschlauch nicht mit dem Mund durch, da so Feuchtigkeit und Bakterien in den Schlauch gelangen können.

5 Pro Akustik Hörsystem-Pflegeprodukte in der Übersicht

Weil Ihr hochwertiges Hörsystem eine besondere Pflege benötigt, um Ihnen im tadellosen Zustand erhalten zu bleiben, finden Sie bei Ihrem Pro-Akustiker eine speziell für Hörsysteme entwickelte und perfekt aufeinander abgestimmte Pflegeserie, die alle Produkte beinhaltet, die Sie zum optimalen Trocknen und schonenden Reinigen Ihres Hörsystems brauchen.

Eine kleine Übersicht soll es Ihnen erleichtern, für Ihren Gerätetyp die passenden Produkte zu finden.

Geeignet für die Reinigung von IO-Systemen oder dem Höreräteteil des HdO-Systems



Reinigungstücher



*Reinigungsspray
mit Zerstäuber*



Reinigungsstick

Geeignet für das Trocknen von IO- und HdO-Systemen



*Trockenbecher und
Trockenkapseln*



elektrisches Trockenkissen

Geeignet für die Reinigung von Ohrspasstück und Schallschlauch des HdO-Systems



*Reinigungsbecher und
Reinigungstabletten*



Airball

Pro Akustik Hörakustiker GmbH & Co. KG
Königstraße 52 · 30175 Hannover

Ob Sie Fragen zur Hörsystemreinigung und -pflege haben
oder sich die entsprechenden Pflegeprodukte zeigen lassen wollen,
Ihr Pro-Akustiker nimmt sich gern Zeit für Sie.

Schauen Sie doch einfach mal vorbei!

www.proakustik.de

pro akustik®
ÜBER 160X IN DEUTSCHLAND